



Obligatorisk programuppdatering och versionskommentarer för i-STAT 1 System April 2024

Denna uppdatering innehåller information om ny programvara för i-STAT 1 Analyser. **Detta är en obligatorisk programuppdatering för i-STAT 1.** Programvaran för i-STAT 1 Analyser kan laddas ned direkt från Abbots webbplats: www.globalpointofcare.abbott.

PÅMINNELSE:

- Kunder måste ha ett användarkonto på www.globalpointofcare.abbott för att få tillgång till programvarufileerna.

UPPDATERINGAR:

Anmärkning 1: Som tidigare meddelades i oktober 2023 kommer programvaran för i-STAT 1 Analyser inte längre att finnas tillgänglig på CD-skiva utan enbart tillgängliggöras via supportavsnittet på Abbots webbplats: www.globalpointofcare.abbott.

PROGRAMVERSION

Rätt programversion och CLEW för installation på dina analysatorer anges nedan.

STANDARDPROGRAMVARA

JAM2157 & CLEW A48

Observera att den aktuella programvaran löper ut **19 JUNI 2024**.

Utgångsdatum

Femton dagar innan programvaran utgår visas ett meddelande på analysatorns skärm som påminner användaren om att utgångsdatumet snart infaller. Om uppdateringen inte har genomförts före kl. 8.00 den 19 juni 2024 inaktiveras testning och analysatorn visar EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL (kvalitetskontrollkod 12).

Den nya programvaran löper ut 11 DECEMBER 2024.

VÄRDETILLDELNINGSBLAD (VAS och eVAS)

Värdetilldelningsblad (VAS och eVAS) för nya CLEW A48 kan laddas ner eller skrivas ut från Abbots webbplats: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDISERING

Uppdatering av CLEW

i-STAT 1 System är utformat för att eliminera operatörspåverkan på levererade resultat. Mikrosensortekniken ger repeterbara resultat från sats till sats vilket innebär att analytatorerna kan använda samma uppsättning standardiserade värden under längre tidsperioder.

Abbots ständiga förbättringar av tillverkningsprocessen kräver ändå att standardiseringsvärden återställs emellanåt för att upprätthålla konsekvens på lång sikt. Detta motsvarar att justera kalibreringen för en traditionell analysator. Vi brukar åstadkomma detta genom regelbundna släpp av programvara. Nya CLEW återställer standardiseringen och införlivar förbättringar av det inbyggda kvalitetsövervakningssystemet.

Framtida kassettleveranser kan kräva installation av den här programvaran innan kassetterna används.

Denna programvara stöder samtliga aktuella icke utgångna kassetter.

UTFÖRA PROGRAMUPPDATERINGEN

Ta reda på systeminställningen med hjälp av nedanstående tabell innan du genomför programuppdateringen. Kontrollera att du har administratörsrättigheter på den dator som används för programuppdateringen.

Om du är osäker på vilken metod du ska använda för att utföra programuppdateringen eller om du har administratörsrättigheter eller inte ska du kontakta programadministratören för din vårdanläggning för hjälp.


OM du har en dator med:	OM du har en i-STAT/DE med:
<ul style="list-style-type: none">en ansluten <i>i-STAT 1 Serial Downloader</i> (DS-300) eller <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) och använder en DB9-till-DB9-kabel med en USB-serieadapter* <p style="text-align: center;">ELLER</p> <ul style="list-style-type: none">en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet</i> (DRC-300) med USB-kabel** <p style="text-align: center;">OCH</p>	<ul style="list-style-type: none">en <i>i-STAT 1 Network Downloader</i> (DN-300) eller <i>i-STAT 1-Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">ELLER</p> <ul style="list-style-type: none">en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet</i> (DRC-300) <p style="text-align: center;">OCH</p>
<ul style="list-style-type: none">en nedladdad programfil (CLEW/JAMS) från webbplatsen www.globalpointofcare.abbott	<ul style="list-style-type: none">åtkomst till Customization Workspace <p style="text-align: center;">OCH</p> <ul style="list-style-type: none">en nedladdad programfil (CLEW/JAMS) från webbplatsen www.globalpointofcare.abbott
SKA DU	SKA DU
<p>följa följande instruktioner, som finns på www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Instruktioner för uppdatering av i-STAT 1 Analyser-programvara med www.globalpointofcare.abbott, art.: 731335</i>	<p>följa följande instruktioner, som finns på www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Nätverksalternativ för uppdatering av i-STAT 1 Analyser med www.globalpointofcare.abbott, art: 731336</i>

* Följ installationsanvisningarna från USB-serieadaptorns tillverkare. Abbott tillhandahåller inte USB-serieadaptorer för användning med DB9-till-DB9-kabeln (9-stiftskontakt).

** För i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet (DRC-300) upptäcker och använder Windows-operativsystemet lämplig drivrutin. Mer information finns i *avsnitt 6 i handboken för i-STAT 1 System*.

PÅMINNELSER OCH MEDDELANDEN OM PRODUKTENS LIVSCYKEL

Abbott har åtagit sig att upprätthålla de högsta standarderna för de produkter vi utformar, utvecklar och underhåller. Som en del av detta åtagande är det nödvändigt att omvandla produkter genom produktlivscykeln.

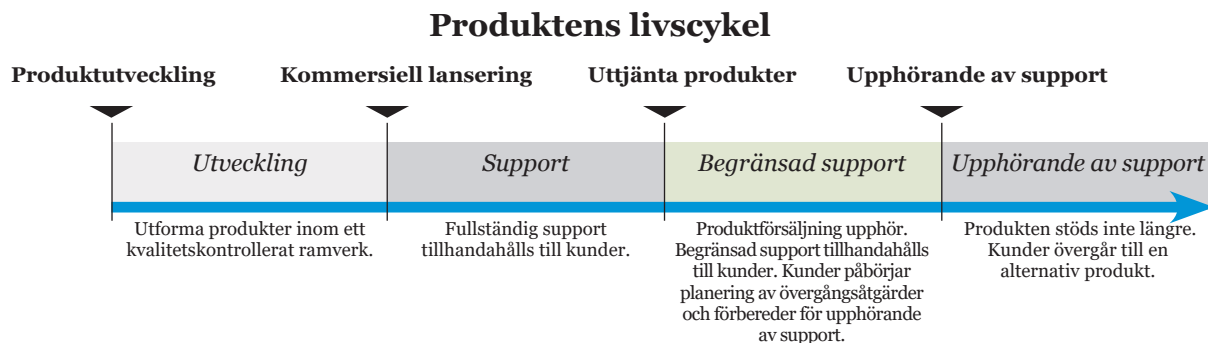

PÅMINNELSE(R) OM ATT SUPPORT UPPHÖR

Inga produkter har blivit uttjänta och supporten har inte upphört för någon produkt under denna cykel.

UPPDATERINGAR AV HANDBOKEN FÖR i-STAT 1 SYSTEM

Försättsbladet till handboken för i-STAT 1 System har uppdaterats med följande ändringar:

- EC-REP-information har tagits bort.
- Versionskommentarer där ändringarna i handboken för i-STAT 1 System sammanfattas har lagts till.

Innehållsförteckningen har uppdaterats för att återspegla aktuella sidnummer för alla avsnitt.

Både avsnitt 3 (i-STAT 1 Analyzer) och avsnitt 15 (Anpassning) har uppdaterats för inkludering av en ny bild som visar uppdaterat innehåll för sidan Analyzer Status. En ny versionsparameter har lagts till på statussidan som beskriver den aktuella versionen av programvara som har installerats i analysatorn.

- Ett nytt avsnitt om EMC-regleringar har lagts till direkt efter specifikationstabellen för att visa att i-STAT 1 Analyzer följer kraven i IEC 61326-1 och IEC 61326-2-6.

Avsnitt 6 (i-STAT 1 Downloader/Recharger) har uppdaterats för att inkludera anvisningar för konfiguration av DRC-300 med Windows 11. Vidare har en rad lagts till i DRC-300 LED-indikator Tabellen för att förtydliga LED-lampornas beteende när ett reservbatteri placeras i laddningsfacket.

Avsnitt 11 (Felsöka analysatorn) har uppdaterats för att omfatta kvalitetskontrollkod 69.

Avsnitt 12 (Kvalitetskontroll) och avsnitt 13 (Kalibreringsverifiering) har uppdaterats så att proceduren för test av kvalitetskontrollen eller kalibreringsverifieringsmaterialet har flyttats mot början av respektive avsnitt.

UPPDATERING AV TEKNISKA RAPPORTER

Den tekniska rapporten med analysatorns kodade meddelanden har uppdaterats för att omfatta kvalitetskontrollkod 69.

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.