



## i-STAT 1 System Zorunlu Yazılım Güncellemesi Sürüm Notları Nisan 2024

Bu güncelleme i-STAT 1 analizörü için yeni yazılıma ilişkin bilgileri içermektedir. **Bu zorunlu bir i-STAT 1 Yazılım güncellemesidir.** i-STAT 1 analizör yazılımı doğrudan Abbott web sitesinden indirilebilir: [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott).

### BİLGİ NOTU:

- Müşterilerin yazılım dosyalarına erişmeleri için [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott) adresinde bir kullanıcı hesaplarının olması gerekmektedir.

### GÜNCELLEMELER:

**Not 1:** Ekim 2023'te duyurulduğu gibi, i-STAT 1 analyzer yazılımı artık CD-ROM ortamında sunulmayacak ve yalnızca [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott) adresindeki Abbott web sitesinin Destek bölümünden temin edilebilecektir.

## YAZILIM SÜRÜMÜ

Analizörlerinize yüklenecek doğru CLEW ve yazılım sürümü aşağıda listelenmiştir.

<b>STANDART YAZILIM</b>
JAM2157 & CLEW A48

Geçerli yazılım süresinin **19 HAZİRAN 2024** tarihinde sona ereceğini lütfen unutmayın.

**Son Kullanma Tarihi** Yazılımın süresi dolmadan on beş gün önce, analizör ekranında kullanıcıyı yaklaşan son kullanma tarihi konusunda uyarıcı bir mesaj görüntülenir. Bu güncellenin 19 HAZİRAN 2024 saat 8:00'e kadar gerçekleştirilmemesi halinde test etme devre dışı kalır ve analizör ekranında "EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL" (YAZILIMIN SÜRESİ DOLDU – GÜNCELLEME GEREKLİ – KILAVUZA BAKIN) (kalite kontrol kodu 12) mesajı görüntülenir.

*Yeni yazılım 11 ARALIK 2024'e kadar geçerlidir.*

## DEĞER ATAMA BELGELERİ (VAS ve eVAS)

Yeni CLEW A48'in Değer Atama Belgeleri (VAS ve eVAS), Abbott web sitesinden indirilebilir veya yazdırılabilir: [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott).

## STANDARDİZASYON

**CLEW Güncellemesi** i-STAT 1 System, operatörlerin alınan sonuçlar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır. Mikro-fabrikasyon sensör teknolojisi analizörlerin uzun süre aynı standardize değerler dizisini kullanmasına olanak tanıyacak şekilde partiden partiye tekrarlanabilir sonuçlar üretir.

Yine de, sürekli üretim işlemi ile ilgili Abbott tarafından kaydedilen ilerlemeler, uzun vadede tutarlılık sağlamak için zaman zaman standardizasyon değerlerinin yeniden belirlenmesini gerektirir. Bu, geleneksel bir analizör üzerinde kalibrasyon yapılmasına eşdeğerdir. Bunu periyodik yazılım sürümleri ile sağlıyoruz. Bu yeni CLEW standardizasyonu yeniden belirler ve dâhilî kalite gözetim sistemine geliştirmeler ekler.

Gelecekteki kartuş sevkیاتları, kartuşlar kullanılmadan önce bu yazılımın yüklenmesini gerektirebilir.

Bu yazılım, süresi dolmamış mevcut tüm kartuşları destekler.

## YAZILIM GÜNCELLEMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Lütfen yazılım güncellemesi yapmadan önce sistem kurulumunuzu aşağıdaki tabloya göre tanımlayın. Yazılım güncellemesi için kullanılacak bilgisayarda yönetici izinlerine sahip olduğunuzdan emin olun.

Yazılım güncellemesi yapma yönteminizden veya yönetici izinlerine sahip olduğunuzdan emin değilseniz lütfen yardım almak üzere point-of-care programı yöneticinizle iletişime geçin.

EĞER bilgisayarınızda şunlar varsa:	EĞER i-STAT/DE'nizde şunlar varsa:
<ul style="list-style-type: none"><li>USB seri bağdaştırıcı* DB9'dan DB9'a kablo kullanan bağlı seri <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) veya <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) <b>VEYA</b></li><li>bir USB kablolu** <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Kombinasyonu</i> (DRC-300) <b>VE</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>bir Ağ için <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) veya <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <b>VEYA</b></li><li>bir <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Kombinasyonu</i> (DRC-300) <b>VE</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> web sitesi üzerinden indirilmiş bir Yazılım Dosyası (CLEW/JAMS).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Özelleştirme Çalışma Alanına erişim. <b>VE</b></li><li><a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> web sitesi üzerinden indirilmiş bir Yazılım Dosyası (CLEW/JAMS).</li></ul>
O ZAMAN	O ZAMAN
<p><a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> adresinde bulunan şu talimatları izleyin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>i-STAT 1 Analyzer Yazılımını</i> <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> Aracılığıyla Güncellemeye Yönelik Talimatlar, Makale:731335</li></ul>	<p><a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> adresinde bulunan şu talimatları izleyin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>i-STAT 1 Analyzer'in</i> <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> Aracılığıyla Güncellenmesine Yönelik Ağ Seçenekleri, Makale:731336</li></ul>


\* USB seri bağdaştırıcı üreticisinin kurulum talimatlarını izleyin. Abbott, DB9'dan DB9'a (9 pimli kablo) kablo ile kullanılması için USB seri bağdaştırıcı sağlamamaktadır.

\*\*i-STAT 1 Downloader/Recharger Kombinasyonu (DRC-300) için Windows işletim sistemi uygun sürücüyü saptayacak ve uygulayacaktır. Daha fazla ayrıntı için *i-STAT 1 Sistem Kılavuzu Bölüm 6'*ya bakın.

## ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ BİLGİ NOTLARI VE İKAZLARI

Abbott, tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve bakımını yaptığımız ürünlerde en yüksek standartları korumayı taahhüt eder. Bu taahhüdün bir parçası olarak bu ürünlerin kullanım ömrü boyunca geçişini yapmak da gerekmektedir.

### Ürün Kullanım Ömrü

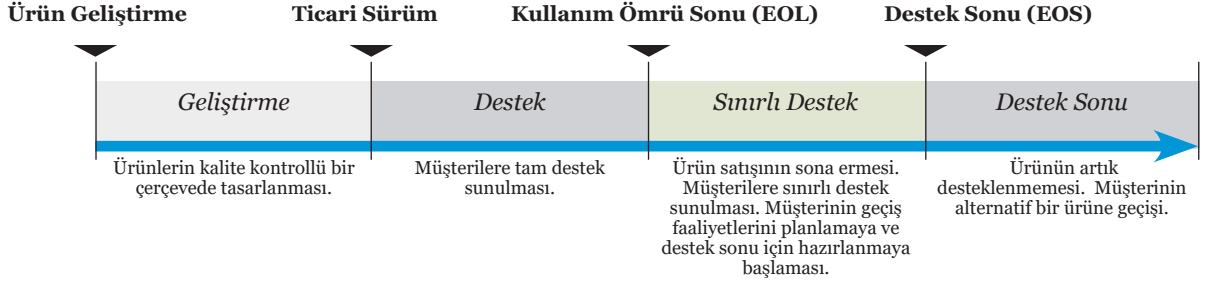

### DESTEK SONU BİLGİ NOTU (NOTLARI)

Bu döngüde hiçbir ürün kullanım ömrü sonu veya destek sonuna ulaşmamıştır.

## i-STAT 1 SYSTEM KILAVUZU GÜNCELLEMELERİ

i-STAT 1 System Kılavuzu Kapak Sayfası aşağıdaki değişikliklerle güncellenmiştir:

- EC-REP bilgileri kaldırıldı
- i-STAT 1 System Kılavuzu'ndaki değişiklikleri özetleyen sürüm notları eklendi

İçindekiler bölümü, her bir bölümün geçerli sayfa numaralandırmasını gösterecek şekilde güncellendi.

Bölüm 3 (i-STAT 1 Analyzer) ve Bölüm 15 (Customization), Analizör Durum Sayfasının güncellenmiş içeriğini gösteren yeni bir görüntüyü içerecek şekilde güncellendi. Analizörde yüklü olan uygulama yazılımının yayınlanmış mevcut sürümünü açıklayan Durum Sayfasına yeni bir Sürüm parametresi eklendi.

- i-STAT 1 Analyzer'in IEC 61326-1 ve IEC 61326-2-6 gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek için doğrudan Teknik Özellikler tablosundan sonra da yeni EMC Yönetmelikleri bölümü eklendi.

Bölüm 6 (i-STAT 1 Downloader/Recharger), DRC-300'ün Windows 11 kullanılarak yapılandırılması için talimatları içerecek şekilde güncellendi. Ek olarak, DRC-300 LED Gösterge tablosuna bir satır eklenerek şarj bölmesine yedek batarya yerleştirildiğinde LED ışıkların gösterdiği davranış açıklandı.

Bölüm 11 (Analizörde Sorun Giderme), Kalite Kalite Kontrol Kodu 69'u içerecek şekilde güncellendi.

Bölüm 12 (Kalite Kontrolü) ve Bölüm 13 (Kalibrasyon Doğrulama), kalite kontrolü testi veya kalibrasyon doğrulama malzemeleri prosedürü her bir bölümün başına alınacak şekilde güncellendi.

## TEKNİK BÜLTEN GÜNCELLEMELERİ

Analizör Kodlu Mesajları Teknik Bülteni, Kalite Kontrol Kodu 69'u içerecek şekilde güncellendi.

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.