



Abbott Point of Care  
400 College Road East  
Princeton, NJ 08540

## Aktualisierte Bereiche der Rili-BÄK- Wertezuweisungsübersicht (R-VAS) für den i-STAT Glukosetest – CLEW A52

| Produktname                    | Artikelnummer | Tabelle der<br>Rili-BÄK-<br>Wertezuweisungsübersicht |                     |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>i-STAT CG8+ Kartusche</b>   | 03P88-25      | <b>LOT</b>                                           | A, K, L, M, N, W, Y |
| <b>i-STAT CHEM8+ Kartusche</b> | 09P31-25      | <b>LOT</b>                                           | H                   |
| <b>i-STAT G Kartusche</b>      | 03P83-25      | <b>LOT</b>                                           | F, H, J, K          |

Juni 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde von Abbott,  
in einer Revision der *Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen – Rili-BÄK*, die am 1. Juni 2026 in Kraft getreten ist, wurde die relative Abweichung einer einzelnen Messung der Kontrollprobe für Glukose auf  $\pm 5,0$  % aktualisiert.

In diesem Brief werden die aktualisierten Bereiche für den i-STAT Glukosetest, der in den *i-STAT CG8+*, *CHEM8+* und *G* Kartuschen mit dem *i-STAT* System enthalten ist, in einer menschenlesbaren Form bereitgestellt, bis sowohl die menschenlesbaren als auch die elektronischen Wertezuweisungsübersichten unter [www.globalpointofcare.abbott/de/de/support/istat-system-customers/vas-evas.html](http://www.globalpointofcare.abbott/de/de/support/istat-system-customers/vas-evas.html) aktualisiert wurden.

Die aktualisierten i-STAT Glukosebereiche für CLEW A52 können den nachfolgenden Tabellen der Rili-BÄK-Wertezuweisungsübersicht entnommen werden.

Nur zur in-vitro-diagnostischen Anwendung.  
*i-STAT* ist eine eingetragene Marke von Abbott.  
Informationen zum Verwendungszweck und vollständige Produktinformationen finden Sie unter [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott). 06-2026-35 i-STAT Glukosetest Rili-BÄK-VAS-Bereiche Juni 2026 – CLEW A52

CLEW: A52

|                                                                                             |        | i-STAT® Level 1<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             |        |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                             |        |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|                                                                                             |        | 101197                                                                                 |                                      | 111197                                                                                 |                                      | 121197                                                                                   |                                      |
|                                                                                             |        | 2027-05-31                                                                             |                                      | 2027-05-31                                                                             |                                      | 2027-05-31                                                                               |                                      |
| CG4+<br> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                                                                                          |        | 7.045                                                                                  | 7.017 - 7.073                        | 7.468                                                                                  | 7.438 - 7.498                        | 7.669                                                                                    | 7.638 - 7.700                        |
| PCO2                                                                                        | mmHg   | 54.5                                                                                   | 50.9 - 58.0                          | 25.8                                                                                   | 23.8 - 27.7                          | 22.0                                                                                     | 20.4 - 23.7                          |
|                                                                                             | kPa    | 7.26                                                                                   | 6.78 - 7.73                          | 3.44                                                                                   | 3.17 - 3.69                          | 2.93                                                                                     | 2.72 - 3.16                          |
| PO2                                                                                         | mmHg   | 88                                                                                     | 82 - 94                              | 122                                                                                    | 113 - 130                            | 148                                                                                      | 140 - 156                            |
|                                                                                             | kPa    | 11.7                                                                                   | 10.9 - 12.5                          | 16.3                                                                                   | 15.1 - 17.3                          | 19.7                                                                                     | 18.7 - 20.8                          |
| Lactate/Lac                                                                                 | mmol/L | 7.92                                                                                   | 7.05 - 8.80                          | 2.34                                                                                   | 2.08 - 2.60                          | 1.07                                                                                     | 0.95 - 1.19                          |
|                                                                                             | mg/dL  | 71.4                                                                                   | 63.5 - 79.3                          | 21.1                                                                                   | 18.7 - 23.4                          | 9.6                                                                                      | 8.6 - 10.7                           |
|                                                                                             | g/L    | 0.714                                                                                  | 0.635 - 0.793                        | 0.211                                                                                  | 0.187 - 0.234                        | 0.096                                                                                    | 0.086 - 0.107                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

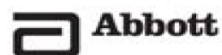

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                    |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                        | 101197                               | LOT                        | 111197                               | LOT                        | 121197                               |
|                                    |               | Exp.                       | 2027-05-31                           | Exp.                       | 2027-05-31                           | Exp.                       | 2027-05-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                            |                                      |                            |                                      |                            |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 120                        | 117 - 124                            | 133                        | 129 - 137                            | 163                        | 158 - 167                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.9                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.4                        | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                | mmol/L        | 1.57                       | 1.45 - 1.68                          | 1.25                       | 1.15 - 1.34                          | 0.73                       | 0.62 - 0.83                          |
|                                    | mg/dL         | 6.3                        | 5.8 - 6.7                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.9                        | 2.5 - 3.3                            |
|                                    | mEq/L         | 3.1                        | 2.9 - 3.4                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.5                        | 1.2 - 1.7                            |
| pH                                 |               | 7.041                      | 7.013 - 7.069                        | 7.464                      | 7.434 - 7.494                        | 7.656                      | 7.625 - 7.687                        |
| PCO2                               | mmHg          | 55.5                       | 51.9 - 59.1                          | 26.6                       | 24.6 - 28.6                          | 21.9                       | 20.2 - 23.5                          |
|                                    | kPa           | 7.40                       | 6.92 - 7.88                          | 3.55                       | 3.28 - 3.81                          | 2.92                       | 2.69 - 3.13                          |
| PO2                                | mmHg          | 88                         | 82 - 94                              | 118                        | 110 - 126                            | 144                        | 136 - 152                            |
|                                    | kPa           | 11.7                       | 10.9 - 12.5                          | 15.7                       | 14.7 - 16.8                          | 19.2                       | 18.1 - 20.3                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 41                         | 39 - 43                              | 121                        | 115 - 127                            | 285                        | 271 - 299                            |
|                                    | g/L           | 0.41                       | 0.39 - 0.43                          | 1.21                       | 1.15 - 1.27                          | 2.85                       | 2.71 - 2.99                          |
|                                    | mmol/L        | 2.3                        | 2.2 - 2.4                            | 6.7                        | 6.4 - 7.0                            | 15.8                       | 15.0 - 16.6                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 4.1                        | 3.6 - 4.5                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                                    | umol/L        | 359                        | 318 - 400                            | 151                        | 134 - 169                            | 49                         | 43 - 54                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 7.76                       | 6.90 - 8.61                          | 2.29                       | 2.03 - 2.54                          | 1.03                       | 0.92 - 1.14                          |
|                                    | mg/dL         | 69.9                       | 62.2 - 77.6                          | 20.6                       | 18.3 - 22.9                          | 9.3                        | 8.3 - 10.3                           |
|                                    | g/L           | 0.699                      | 0.622 - 0.776                        | 0.206                      | 0.183 - 0.229                        | 0.093                      | 0.083 - 0.103                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

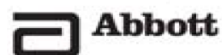

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                 |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                        | 101197                               | LOT                        | 111197                               | LOT                        | 121197                               |
|                 |               | Exp.                       | 2027-05-31                           | Exp.                       | 2027-05-31                           | Exp.                       | 2027-05-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 120                        | 117 - 124                            | 133                        | 129 - 137                            | 161                        | 156 - 166                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.8                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.3                        | 6.0 - 6.6                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 76                         | 73 - 80                              | 89                         | 85 - 93                              | 110                        | 105 - 115                            |
| iCa             | mmol/L        | 1.58                       | 1.46 - 1.70                          | 1.25                       | 1.15 - 1.34                          | 0.72                       | 0.62 - 0.83                          |
|                 | mg/dL         | 6.3                        | 5.8 - 6.8                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.9                        | 2.5 - 3.3                            |
|                 | mEq/L         | 3.2                        | 2.9 - 3.4                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.4                        | 1.2 - 1.7                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 18                         | 9 - 27                               | 22                         | 16 - 29                              | 28                         | 22 - 34                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 41                         | 39 - 43                              | 120                        | 114 - 126                            | 285                        | 270 - 299                            |
|                 | g/L           | 0.41                       | 0.39 - 0.43                          | 1.20                       | 1.14 - 1.26                          | 2.85                       | 2.70 - 2.99                          |
|                 | mmol/L        | 2.3                        | 2.2 - 2.4                            | 6.7                        | 6.3 - 7.0                            | 15.8                       | 15.0 - 16.6                          |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.1                        | 3.6 - 4.6                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                 | umol/L        | 364                        | 322 - 406                            | 154                        | 136 - 171                            | 50                         | 44 - 55                              |
| BUN             | mg/dL         | 57                         | 50 - 63                              | 10                         | 9 - 11                               | 7                          | 7 - 8                                |
| Urea            | mmol/L        | 20.2                       | 18.0 - 22.3                          | 3.5                        | 3.2 - 4.0                            | 2.5                        | 2.3 - 2.8                            |
|                 | mg/dL         | 121                        | 108 - 134                            | 21                         | 19 - 24                              | 15                         | 14 - 17                              |
|                 | g/L           | 1.21                       | 1.08 - 1.34                          | 0.21                       | 0.19 - 0.24                          | 0.15                       | 0.14 - 0.17                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

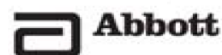

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|             |        | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                        | 101197                               | LOT                        | 111197                               | LOT                        | 121197                               |
|             |        | Exp.                       | 2027-05-31                           | Exp.                       | 2027-05-31                           | Exp.                       | 2027-05-31                           |
| G           |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 40                         | 38 - 42                              | 121                        | 115 - 127                            | 285                        | 271 - 299                            |
|             | g/L    | 0.40                       | 0.38 - 0.42                          | 1.21                       | 1.15 - 1.27                          | 2.85                       | 2.71 - 2.99                          |
|             | mmol/L | 2.2                        | 2.1 - 2.3                            | 6.7                        | 6.4 - 7.0                            | 15.8                       | 15.0 - 16.6                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

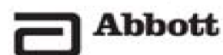

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                                                                                           |        | i-STAT® Level 1<br>Control                                                                    |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control                                                                    |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control                                                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                           |        |  <b>LOT</b>  | <b>101194</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>111194</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>121194</b>                        |
|                                                                                                           |        |  <b>Exp.</b> | <b>2027-02-28</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-02-28</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-02-28</b>                    |
| <b>CG4+</b><br> <b>D</b> |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                                                                                                        |        | 7.041                                                                                         | 7.013 - 7.069                        | 7.443                                                                                         | 7.413 - 7.473                        | 7.649                                                                                           | 7.618 - 7.680                        |
| <b>PCO2</b>                                                                                               | mmHg   | 55.8                                                                                          | 52.1 - 59.4                          | 27.4                                                                                          | 25.3 - 29.4                          | 22.1                                                                                            | 20.5 - 23.8                          |
|                                                                                                           | kPa    | 7.44                                                                                          | 6.94 - 7.92                          | 3.65                                                                                          | 3.37 - 3.92                          | 2.95                                                                                            | 2.73 - 3.17                          |
| <b>PO2</b>                                                                                                | mmHg   | 90                                                                                            | 84 - 96                              | 123                                                                                           | 115 - 132                            | 151                                                                                             | 142 - 159                            |
|                                                                                                           | kPa    | 12.0                                                                                          | 11.2 - 12.8                          | 16.4                                                                                          | 15.3 - 17.6                          | 20.1                                                                                            | 18.9 - 21.2                          |
| Lactate/Lac                                                                                               | mmol/L | 7.94                                                                                          | 7.06 - 8.81                          | 2.40                                                                                          | 2.13 - 2.66                          | 1.10                                                                                            | 0.97 - 1.22                          |
|                                                                                                           | mg/dL  | 71.5                                                                                          | 63.6 - 79.4                          | 21.6                                                                                          | 19.2 - 24.0                          | 9.9                                                                                             | 8.7 - 11.0                           |
|                                                                                                           | g/L    | 0.715                                                                                         | 0.636 - 0.794                        | 0.216                                                                                         | 0.192 - 0.240                        | 0.099                                                                                           | 0.087 - 0.110                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

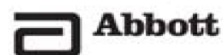

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                    |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                        | 101194                               | LOT                        | 111194                               | LOT                        | 121194                               |
|                                    |               | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                            |                                      |                            |                                      |                            |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 121                        | 118 - 125                            | 134                        | 130 - 138                            | 163                        | 158 - 167                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.8                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.3                        | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                | mmol/L        | 1.52                       | 1.41 - 1.64                          | 1.26                       | 1.16 - 1.35                          | 0.70                       | 0.60 - 0.80                          |
|                                    | mg/dL         | 6.1                        | 5.6 - 6.6                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.8                        | 2.4 - 3.2                            |
|                                    | mEq/L         | 3.0                        | 2.8 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.4                        | 1.2 - 1.6                            |
| pH                                 |               | 7.037                      | 7.009 - 7.065                        | 7.443                      | 7.413 - 7.473                        | 7.642                      | 7.611 - 7.673                        |
| PCO2                               | mmHg          | 57.4                       | 53.7 - 61.1                          | 28.6                       | 26.4 - 30.7                          | 22.5                       | 20.8 - 24.2                          |
|                                    | kPa           | 7.65                       | 7.16 - 8.14                          | 3.81                       | 3.52 - 4.09                          | 3.00                       | 2.77 - 3.23                          |
| PO2                                | mmHg          | 88                         | 82 - 94                              | 116                        | 108 - 125                            | 145                        | 137 - 153                            |
|                                    | kPa           | 11.7                       | 10.9 - 12.5                          | 15.5                       | 14.4 - 16.7                          | 19.3                       | 18.3 - 20.4                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 42                         | 39 - 44                              | 121                        | 115 - 127                            | 285                        | 270 - 299                            |
|                                    | g/L           | 0.42                       | 0.39 - 0.44                          | 1.21                       | 1.15 - 1.27                          | 2.85                       | 2.70 - 2.99                          |
|                                    | mmol/L        | 2.3                        | 2.2 - 2.4                            | 6.7                        | 6.4 - 7.0                            | 15.8                       | 15.0 - 16.6                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 4.0                        | 3.5 - 4.5                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.5                        | 0.5 - 0.6                            |
|                                    | umol/L        | 354                        | 313 - 394                            | 150                        | 133 - 168                            | 47                         | 42 - 52                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 7.85                       | 6.98 - 8.71                          | 2.35                       | 2.09 - 2.61                          | 1.04                       | 0.93 - 1.16                          |
|                                    | mg/dL         | 70.7                       | 62.9 - 78.5                          | 21.2                       | 18.8 - 23.5                          | 9.4                        | 8.4 - 10.5                           |
|                                    | g/L           | 0.707                      | 0.629 - 0.785                        | 0.212                      | 0.188 - 0.235                        | 0.094                      | 0.084 - 0.105                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

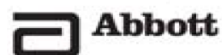

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                 |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                        | 101194                               | LOT                        | 111194                               | LOT                        | 121194                               |
|                 |               | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 121                        | 118 - 125                            | 134                        | 129 - 138                            | 162                        | 157 - 167                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.8                        | 2.7 - 2.9                            | 3.7                        | 3.5 - 3.8                            | 6.3                        | 6.0 - 6.6                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 78                         | 74 - 81                              | 89                         | 85 - 93                              | 110                        | 105 - 115                            |
| iCa             | mmol/L        | 1.51                       | 1.40 - 1.63                          | 1.25                       | 1.15 - 1.34                          | 0.69                       | 0.59 - 0.79                          |
|                 | mg/dL         | 6.0                        | 5.6 - 6.5                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.8                        | 2.4 - 3.2                            |
|                 | mEq/L         | 3.0                        | 2.8 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.4                        | 1.2 - 1.6                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 19                         | 10 - 28                              | 22                         | 15 - 28                              | 28                         | 22 - 34                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 42                         | 40 - 44                              | 120                        | 114 - 126                            | 283                        | 269 - 298                            |
|                 | g/L           | 0.42                       | 0.40 - 0.44                          | 1.20                       | 1.14 - 1.26                          | 2.83                       | 2.69 - 2.98                          |
|                 | mmol/L        | 2.3                        | 2.2 - 2.4                            | 6.7                        | 6.3 - 7.0                            | 15.7                       | 14.9 - 16.5                          |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.2                        | 3.7 - 4.7                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                 | umol/L        | 370                        | 328 - 413                            | 153                        | 135 - 170                            | 50                         | 44 - 55                              |
| BUN             | mg/dL         | 58                         | 52 - 64                              | 10                         | 9 - 11                               | 7                          | 7 - 8                                |
| Urea            | mmol/L        | 20.8                       | 18.5 - 23.0                          | 3.7                        | 3.2 - 4.0                            | 2.7                        | 2.3 - 2.8                            |
|                 | mg/dL         | 125                        | 111 - 138                            | 22                         | 19 - 24                              | 16                         | 14 - 17                              |
|                 | g/L           | 1.25                       | 1.11 - 1.38                          | 0.22                       | 0.19 - 0.24                          | 0.16                       | 0.14 - 0.17                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

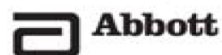

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|             |        | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                        | 101194                               | LOT                        | 111194                               | LOT                        | 121194                               |
|             |        | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           |
| G           |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 41                         | 39 - 43                              | 121                        | 115 - 127                            | 286                        | 272 - 300                            |
|             | g/L    | 0.41                       | 0.39 - 0.43                          | 1.21                       | 1.15 - 1.27                          | 2.86                       | 2.72 - 3.00                          |
|             | mmol/L | 2.3                        | 2.2 - 2.4                            | 6.7                        | 6.4 - 7.0                            | 15.9                       | 15.1 - 16.7                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

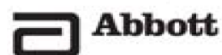

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                                                                             |        | i-STAT® Level 1<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             |        |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                             |        |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|                                                                                             |        | 101190                                                                                 |                                      | 111190                                                                                 |                                      | 121190                                                                                   |                                      |
|                                                                                             |        | 2026-10-31                                                                             |                                      | 2026-10-31                                                                             |                                      | 2026-10-31                                                                               |                                      |
| CG4+<br> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                                                                                          |        | 7.034                                                                                  | 7.006 - 7.062                        | 7.431                                                                                  | 7.401 - 7.461                        | 7.661                                                                                    | 7.630 - 7.692                        |
| PCO2                                                                                        | mmHg   | 55.3                                                                                   | 51.7 - 58.9                          | 28.5                                                                                   | 26.4 - 30.6                          | 22.1                                                                                     | 20.4 - 23.7                          |
|                                                                                             | kPa    | 7.37                                                                                   | 6.89 - 7.85                          | 3.80                                                                                   | 3.52 - 4.08                          | 2.95                                                                                     | 2.72 - 3.16                          |
| PO2                                                                                         | mmHg   | 87                                                                                     | 81 - 93                              | 120                                                                                    | 112 - 128                            | 148                                                                                      | 140 - 156                            |
|                                                                                             | kPa    | 11.6                                                                                   | 10.8 - 12.4                          | 16.0                                                                                   | 14.9 - 17.1                          | 19.7                                                                                     | 18.7 - 20.8                          |
| Lactate/Lac                                                                                 | mmol/L | 7.88                                                                                   | 7.01 - 8.74                          | 2.38                                                                                   | 2.11 - 2.64                          | 1.07                                                                                     | 0.95 - 1.19                          |
|                                                                                             | mg/dL  | 71.0                                                                                   | 63.2 - 78.7                          | 21.4                                                                                   | 19.0 - 23.8                          | 9.6                                                                                      | 8.6 - 10.7                           |
|                                                                                             | g/L    | 0.710                                                                                  | 0.632 - 0.787                        | 0.214                                                                                  | 0.190 - 0.238                        | 0.096                                                                                    | 0.086 - 0.107                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

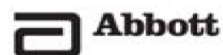

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                    |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                        | 101190                               | LOT                        | 111190                               | LOT                        | 121190                               |
|                                    |               | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                            |                                      |                            |                                      |                            |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 121                        | 117 - 125                            | 133                        | 129 - 137                            | 162                        | 158 - 167                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.9                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.4                        | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                | mmol/L        | 1.54                       | 1.42 - 1.65                          | 1.26                       | 1.16 - 1.35                          | 0.74                       | 0.63 - 0.85                          |
|                                    | mg/dL         | 6.2                        | 5.7 - 6.6                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 3.0                        | 2.5 - 3.4                            |
|                                    | mEq/L         | 3.1                        | 2.8 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.5                        | 1.3 - 1.7                            |
| pH                                 |               | 7.029                      | 7.001 - 7.057                        | 7.429                      | 7.399 - 7.459                        | 7.649                      | 7.618 - 7.680                        |
| PCO2                               | mmHg          | 57.0                       | 53.3 - 60.7                          | 29.3                       | 27.1 - 31.5                          | 21.9                       | 20.3 - 23.6                          |
|                                    | kPa           | 7.60                       | 7.10 - 8.09                          | 3.91                       | 3.61 - 4.20                          | 2.92                       | 2.71 - 3.15                          |
| PO2                                | mmHg          | 87                         | 81 - 94                              | 117                        | 109 - 125                            | 145                        | 137 - 153                            |
|                                    | kPa           | 11.6                       | 10.8 - 12.5                          | 15.6                       | 14.5 - 16.7                          | 19.3                       | 18.3 - 20.4                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 41                         | 39 - 43                              | 121                        | 115 - 127                            | 284                        | 270 - 298                            |
|                                    | g/L           | 0.41                       | 0.39 - 0.43                          | 1.21                       | 1.15 - 1.27                          | 2.84                       | 2.70 - 2.98                          |
|                                    | mmol/L        | 2.3                        | 2.2 - 2.4                            | 6.7                        | 6.4 - 7.0                            | 15.8                       | 15.0 - 16.5                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.9                        | 3.5 - 4.4                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.5                        | 0.5 - 0.6                            |
|                                    | umol/L        | 349                        | 309 - 389                            | 148                        | 131 - 165                            | 48                         | 42 - 53                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 7.72                       | 6.87 - 8.57                          | 2.33                       | 2.07 - 2.58                          | 1.03                       | 0.92 - 1.14                          |
|                                    | mg/dL         | 69.6                       | 61.9 - 77.2                          | 21.0                       | 18.7 - 23.2                          | 9.3                        | 8.3 - 10.3                           |
|                                    | g/L           | 0.696                      | 0.619 - 0.772                        | 0.210                      | 0.187 - 0.232                        | 0.093                      | 0.083 - 0.103                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

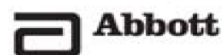

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                 |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                        | 101190                               | LOT                        | 111190                               | LOT                        | 121190                               |
|                 |               | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 121                        | 117 - 124                            | 132                        | 128 - 136                            | 161                        | 156 - 166                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.8                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.3                        | 6.0 - 6.6                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 78                         | 74 - 81                              | 89                         | 85 - 93                              | 110                        | 105 - 115                            |
| iCa             | mmol/L        | 1.53                       | 1.42 - 1.65                          | 1.25                       | 1.16 - 1.34                          | 0.73                       | 0.63 - 0.84                          |
|                 | mg/dL         | 6.1                        | 5.7 - 6.6                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.9                        | 2.5 - 3.4                            |
|                 | mEq/L         | 3.1                        | 2.8 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.5                        | 1.3 - 1.7                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 18                         | 9 - 27                               | 22                         | 16 - 29                              | 28                         | 22 - 34                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 40                         | 38 - 42                              | 120                        | 114 - 125                            | 284                        | 270 - 298                            |
|                 | g/L           | 0.40                       | 0.38 - 0.42                          | 1.20                       | 1.14 - 1.25                          | 2.84                       | 2.70 - 2.98                          |
|                 | mmol/L        | 2.2                        | 2.1 - 2.3                            | 6.7                        | 6.3 - 6.9                            | 15.8                       | 15.0 - 16.5                          |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.0                        | 3.6 - 4.5                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                 | umol/L        | 358                        | 317 - 399                            | 150                        | 133 - 168                            | 49                         | 43 - 54                              |
| BUN             | mg/dL         | 59                         | 53 - 65                              | 10                         | 9 - 11                               | 7                          | 7 - 8                                |
| Urea            | mmol/L        | 21.0                       | 18.8 - 23.3                          | 3.7                        | 3.3 - 4.0                            | 2.7                        | 2.3 - 2.8                            |
|                 | mg/dL         | 126                        | 113 - 140                            | 22                         | 20 - 24                              | 16                         | 14 - 17                              |
|                 | g/L           | 1.26                       | 1.13 - 1.40                          | 0.22                       | 0.20 - 0.24                          | 0.16                       | 0.14 - 0.17                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

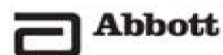

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|             |        | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                        | 101190                               | LOT                        | 111190                               | LOT                        | 121190                               |
|             |        | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           |
| G           |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 40                         | 38 - 42                              | 120                        | 114 - 126                            | 285                        | 270 - 299                            |
|             | g/L    | 0.40                       | 0.38 - 0.42                          | 1.20                       | 1.14 - 1.26                          | 2.85                       | 2.70 - 2.99                          |
|             | mmol/L | 2.2                        | 2.1 - 2.3                            | 6.7                        | 6.3 - 7.0                            | 15.8                       | 15.0 - 16.6                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

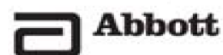

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

| i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LOT</b>                                                                                    | <b>301190</b>     |
|  <b>Exp.</b> | <b>2026-10-31</b> |

| CG4+<br><b>LOT</b> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|----------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| pH                   |        | 7.055                   | 7.027 - 7.083                        |
| PCO2                 | mmHg   | 61.3                    | 57.3 - 65.3                          |
|                      | kPa    | 8.17                    | 7.64 - 8.70                          |
| PO2                  | mmHg   | 75                      | 67 - 83                              |
|                      | kPa    | 10.0                    | 8.9 - 11.1                           |
| Lactate/Lac          | mmol/L | 6.65                    | 5.92 - 7.38                          |
|                      | mg/dL  | 59.9                    | 53.3 - 66.5                          |
|                      | g/L    | 0.599                   | 0.533 - 0.665                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

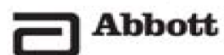

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

| i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>LOT</b>                             | <b>301190</b>     |
| <b>Exp.</b>                            | <b>2026-10-31</b> |

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y     |               |                         |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                     | 121 - 128                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                     | 2.8 - 3.1                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.82                    | 0.70 - 0.94                          |
|                                    | mg/dL         | 3.3                     | 2.8 - 3.8                            |
|                                    | mEq/L         | 1.6                     | 1.4 - 1.9                            |
| pH                                 |               | 7.051                   | 7.023 - 7.079                        |
| PCO2                               | mmHg          | 62.8                    | 58.7 - 66.9                          |
|                                    | kPa           | 8.37                    | 7.82 - 8.92                          |
| PO2                                | mmHg          | 82                      | 76 - 88                              |
|                                    | kPa           | 10.9                    | 10.1 - 11.7                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 250                     | 238 - 263                            |
|                                    | g/L           | 2.50                    | 2.38 - 2.63                          |
|                                    | mmol/L        | 13.9                    | 13.2 - 14.6                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.0                     | 2.7 - 3.3                            |
|                                    | umol/L        | 265                     | 235 - 296                            |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.57                    | 5.85 - 7.30                          |
|                                    | mg/dL         | 59.2                    | 52.7 - 65.8                          |
|                                    | g/L           | 0.592                   | 0.527 - 0.658                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                      | 21 - 23                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                      | 22 - 24                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

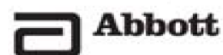

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

| i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>LOT</b>                             | <b>301190</b>     |
| <b>Exp.</b>                            | <b>2026-10-31</b> |

| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 124                     | 120 - 128                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                     | 2.8 - 3.1                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 74                      | 70 - 77                              |
| iCa                    | mmol/L        | 0.82                    | 0.70 - 0.93                          |
|                        | mg/dL         | 3.3                     | 2.8 - 3.7                            |
|                        | mEq/L         | 1.6                     | 1.4 - 1.9                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 21                      | 12 - 30                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 244                     | 232 - 257                            |
|                        | g/L           | 2.44                    | 2.32 - 2.57                          |
|                        | mmol/L        | 13.5                    | 12.9 - 14.3                          |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 3.0                     | 2.7 - 3.4                            |
|                        | umol/L        | 266                     | 235 - 297                            |
| BUN                    | mg/dL         | 57                      | 51 - 63                              |
| Urea                   | mmol/L        | 20.3                    | 18.2 - 22.5                          |
|                        | mg/dL         | 122                     | 109 - 135                            |
|                        | g/L           | 1.22                    | 1.09 - 1.35                          |
| HCT                    | K3EDTA %      | 21                      | 20 - 22                              |
|                        | K2EDTA %      | 22                      | 21 - 23                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

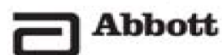

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

| i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LOT</b>                                                                                    | <b>301190</b>     |
|  <b>Exp.</b> | <b>2026-10-31</b> |

| <b>G</b><br><b>LOT</b> F, H, J, K |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| Glucose/Glu                       | mg/dL  | 254                     | 241 - 266                            |
|                                   | g/L    | 2.54                    | 2.41 - 2.66                          |
|                                   | mmol/L | 14.1                    | 13.4 - 14.8                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

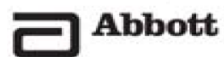

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|              |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|--------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|              |        | <b>LOT</b>                             | <b>301189</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>311188</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>321188</b>                        |
|              |        | Exp.                                   | <b>2026-09-30</b>                    | Exp.                                   | <b>2026-08-31</b>                    | Exp.                                   | <b>2026-08-31</b>                    |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> D |        |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| pH           |        | 7.057                                  | 7.029 - 7.085                        | 7.422                                  | 7.392 - 7.452                        | 7.678                                  | 7.647 - 7.709                        |
| PCO2         | mmHg   | 59.1                                   | 55.2 - 62.9                          | 34.7                                   | 32.1 - 37.3                          | 20.1                                   | 18.6 - 21.6                          |
|              | kPa    | 7.88                                   | 7.36 - 8.38                          | 4.63                                   | 4.28 - 4.97                          | 2.68                                   | 2.48 - 2.88                          |
| PO2          | mmHg   | 76                                     | 68 - 84                              | 115                                    | 107 - 123                            | 141                                    | 133 - 148                            |
|              | kPa    | 10.1                                   | 9.1 - 11.2                           | 15.3                                   | 14.3 - 16.4                          | 18.8                                   | 17.7 - 19.7                          |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 6.58                                   | 5.86 - 7.30                          | 1.96                                   | 1.75 - 2.18                          | 0.87                                   | 0.78 - 0.97                          |
|              | mg/dL  | 59.3                                   | 52.8 - 65.8                          | 17.7                                   | 15.8 - 19.6                          | 7.8                                    | 7.0 - 8.7                            |
|              | g/L    | 0.593                                  | 0.528 - 0.658                        | 0.177                                  | 0.158 - 0.196                        | 0.078                                  | 0.070 - 0.087                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

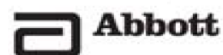

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                    |               | LOT                                    | 301189                         | LOT                                    | 311188                         | LOT                                    | 321188                         |
|                                    |               | Exp.                                   | 2026-09-30                     | Exp.                                   | 2026-08-31                     | Exp.                                   | 2026-08-31                     |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$ (Zielwert)                   | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$ (Zielwert)                   | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$ (Zielwert)                   | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                                        |                                |                                        |                                |                                        |                                |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                                    | 121 - 128                      | 134                                    | 130 - 138                      | 160                                    | 155 - 164                      |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                      | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                      | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                      |
| iCa                                | mmol/L        | 0.82                                   | 0.70 - 0.94                    | 1.24                                   | 1.14 - 1.33                    | 1.55                                   | 1.43 - 1.67                    |
|                                    | mg/dL         | 3.3                                    | 2.8 - 3.8                      | 5.0                                    | 4.6 - 5.3                      | 6.2                                    | 5.7 - 6.7                      |
|                                    | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.9                      | 2.5                                    | 2.3 - 2.7                      | 3.1                                    | 2.9 - 3.3                      |
| pH                                 |               | 7.056                                  | 7.028 - 7.084                  | 7.425                                  | 7.395 - 7.455                  | 7.667                                  | 7.636 - 7.698                  |
| PCO2                               | mmHg          | 60.5                                   | 56.5 - 64.4                    | 35.3                                   | 33.0 - 37.6                    | 19.4                                   | 18.0 - 20.9                    |
|                                    | kPa           | 8.06                                   | 7.53 - 8.58                    | 4.71                                   | 4.40 - 5.01                    | 2.59                                   | 2.40 - 2.79                    |
| PO2                                | mmHg          | 84                                     | 78 - 90                        | 117                                    | 109 - 125                      | 138                                    | 131 - 146                      |
|                                    | kPa           | 11.2                                   | 10.4 - 12.0                    | 15.6                                   | 14.5 - 16.7                    | 18.4                                   | 17.5 - 19.5                    |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 253                                    | 240 - 266                      | 119                                    | 113 - 125                      | 36                                     | 34 - 37                        |
|                                    | g/L           | 2.53                                   | 2.40 - 2.66                    | 1.19                                   | 1.13 - 1.25                    | 0.36                                   | 0.34 - 0.37                    |
|                                    | mmol/L        | 14.0                                   | 13.3 - 14.8                    | 6.6                                    | 6.3 - 6.9                      | 2.0                                    | 1.9 - 2.1                      |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.0                                    | 2.7 - 3.3                      | 1.0                                    | 0.9 - 1.1                      | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                      |
|                                    | umol/L        | 265                                    | 235 - 296                      | 88                                     | 78 - 99                        | 38                                     | 34 - 42                        |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.50                                   | 5.79 - 7.22                    | 1.90                                   | 1.69 - 2.10                    | 0.81                                   | 0.72 - 0.90                    |
|                                    | mg/dL         | 58.6                                   | 52.2 - 65.1                    | 17.1                                   | 15.2 - 18.9                    | 7.3                                    | 6.5 - 8.1                      |
|                                    | g/L           | 0.586                                  | 0.522 - 0.651                  | 0.171                                  | 0.152 - 0.189                  | 0.073                                  | 0.065 - 0.081                  |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                        | 35                                     | 33 - 36                        | 56                                     | 53 - 58                        |
|                                    | K2EDTA %      | 23                                     | 22 - 24                        | 36                                     | 34 - 38                        | 58                                     | 55 - 60                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

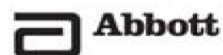

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301189                               | LOT                                    | 311188                               | LOT                                    | 321188                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2026-09-30                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 120 - 127                            | 133                                    | 129 - 137                            | 159                                    | 154 - 164                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.9                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74                                     | 70 - 77                              | 91                                     | 87 - 95                              | 111                                    | 106 - 116                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.81                                   | 0.69 - 0.93                          | 1.22                                   | 1.13 - 1.32                          | 1.52                                   | 1.40 - 1.63                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.7                            | 4.9                                    | 4.5 - 5.3                            | 6.1                                    | 5.6 - 6.5                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                    | 2.3 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.3                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 20                                     | 11 - 29                              | 26                                     | 19 - 32                              | 30                                     | 24 - 36                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 250                                    | 238 - 263                            | 118                                    | 112 - 124                            | 36                                     | 34 - 38                              |
|                 | g/L           | 2.50                                   | 2.38 - 2.63                          | 1.18                                   | 1.12 - 1.24                          | 0.36                                   | 0.34 - 0.38                          |
|                 | mmol/L        | 13.9                                   | 13.2 - 14.6                          | 6.5                                    | 6.2 - 6.9                            | 2.0                                    | 1.9 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.0                                    | 2.7 - 3.4                            | 1.0                                    | 0.9 - 1.1                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 266                                    | 235 - 297                            | 89                                     | 79 - 100                             | 39                                     | 34 - 43                              |
| BUN             | mg/dL         | 57                                     | 52 - 64                              | 11                                     | 10 - 12                              | 7                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 20.5                                   | 18.5 - 22.7                          | 4.0                                    | 3.5 - 4.3                            | 2.3                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 123                                    | 111 - 136                            | 24                                     | 21 - 26                              | 14                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.23                                   | 1.11 - 1.36                          | 0.24                                   | 0.21 - 0.26                          | 0.14                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 34                                     | 32 - 35                              | 54                                     | 51 - 57                              |
|                 | K2EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 36                              | 56                                     | 53 - 59                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

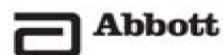

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                       |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                              |                                      |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |        | <b>LOT</b> 301189                                                                                 |                                      | <b>LOT</b> 311188                                                                                 |                                      | <b>LOT</b> 321188                                                                                   |                                      |
|                       |        |  Exp. 2026-09-30 |                                      |  Exp. 2026-08-31 |                                      |  Exp. 2026-08-31 |                                      |
| <b>G</b>              |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> F, H, J, K |        |                                                                                                   |                                      |                                                                                                   |                                      |                                                                                                     |                                      |
| Glucose/Glu           | mg/dL  | 259                                                                                               | 246 - 272                            | 126                                                                                               | 120 - 132                            | 39                                                                                                  | 37 - 41                              |
|                       | g/L    | 2.59                                                                                              | 2.46 - 2.72                          | 1.26                                                                                              | 1.20 - 1.32                          | 0.39                                                                                                | 0.37 - 0.41                          |
|                       | mmol/L | 14.4                                                                                              | 13.7 - 15.1                          | 7.0                                                                                               | 6.7 - 7.3                            | 2.2                                                                                                 | 2.1 - 2.3                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

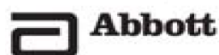

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|              |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|--------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|              |        | <b>LOT</b>                             | <b>301191</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>311191</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>321191</b>                        |
|              |        | Exp.                                   | <b>2026-11-30</b>                    | Exp.                                   | <b>2026-11-30</b>                    | Exp.                                   | <b>2026-11-30</b>                    |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> D |        |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| pH           |        | 7.053                                  | 7.025 - 7.081                        | 7.409                                  | 7.379 - 7.439                        | 7.661                                  | 7.630 - 7.692                        |
| PCO2         | mmHg   | 60.6                                   | 56.6 - 64.5                          | 33.9                                   | 31.3 - 36.4                          | 19.9                                   | 18.4 - 21.4                          |
|              | kPa    | 8.08                                   | 7.54 - 8.60                          | 4.52                                   | 4.17 - 4.85                          | 2.65                                   | 2.45 - 2.85                          |
| PO2          | mmHg   | 77                                     | 68 - 85                              | 115                                    | 107 - 123                            | 141                                    | 133 - 149                            |
|              | kPa    | 10.3                                   | 9.1 - 11.3                           | 15.3                                   | 14.3 - 16.4                          | 18.8                                   | 17.7 - 19.9                          |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 6.79                                   | 6.04 - 7.53                          | 1.99                                   | 1.77 - 2.21                          | 0.94                                   | 0.83 - 1.04                          |
|              | mg/dL  | 61.2                                   | 54.4 - 67.8                          | 17.9                                   | 15.9 - 19.9                          | 8.5                                    | 7.5 - 9.4                            |
|              | g/L    | 0.612                                  | 0.544 - 0.678                        | 0.179                                  | 0.159 - 0.199                        | 0.085                                  | 0.075 - 0.094                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

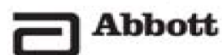

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                                    | 301191                               | LOT                                    | 311191                               | LOT                                    | 321191                               |
|                                    |               | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                                    | 121 - 129                            | 133                                    | 129 - 137                            | 160                                    | 155 - 165                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.81                                   | 0.69 - 0.92                          | 1.22                                   | 1.13 - 1.31                          | 1.54                                   | 1.42 - 1.65                          |
|                                    | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.7                            | 4.9                                    | 4.5 - 5.2                            | 6.2                                    | 5.7 - 6.6                            |
|                                    | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.3 - 2.6                            | 3.1                                    | 2.8 - 3.3                            |
| pH                                 |               | 7.048                                  | 7.020 - 7.076                        | 7.413                                  | 7.383 - 7.443                        | 7.653                                  | 7.622 - 7.684                        |
| PCO2                               | mmHg          | 63.3                                   | 59.2 - 67.4                          | 35.4                                   | 33.1 - 37.7                          | 20.1                                   | 18.5 - 21.6                          |
|                                    | kPa           | 8.44                                   | 7.89 - 8.98                          | 4.72                                   | 4.41 - 5.03                          | 2.68                                   | 2.47 - 2.88                          |
| PO2                                | mmHg          | 82                                     | 76 - 87                              | 116                                    | 108 - 124                            | 139                                    | 131 - 146                            |
|                                    | kPa           | 10.9                                   | 10.1 - 11.6                          | 15.5                                   | 14.4 - 16.5                          | 18.5                                   | 17.5 - 19.5                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 253                                    | 240 - 265                            | 119                                    | 113 - 125                            | 37                                     | 35 - 38                              |
|                                    | g/L           | 2.53                                   | 2.40 - 2.65                          | 1.19                                   | 1.13 - 1.25                          | 0.37                                   | 0.35 - 0.38                          |
|                                    | mmol/L        | 14.0                                   | 13.3 - 14.7                          | 6.6                                    | 6.3 - 6.9                            | 2.1                                    | 1.9 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.0                                    | 2.7 - 3.4                            | 0.9                                    | 0.8 - 1.0                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                                    | umol/L        | 269                                    | 238 - 300                            | 82                                     | 73 - 92                              | 36                                     | 32 - 40                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.75                                   | 6.00 - 7.49                          | 1.96                                   | 1.74 - 2.17                          | 0.90                                   | 0.80 - 1.00                          |
|                                    | mg/dL         | 60.8                                   | 54.1 - 67.5                          | 17.7                                   | 15.7 - 19.6                          | 8.1                                    | 7.2 - 9.0                            |
|                                    | g/L           | 0.608                                  | 0.541 - 0.675                        | 0.177                                  | 0.157 - 0.196                        | 0.081                                  | 0.072 - 0.090                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 37                              | 56                                     | 53 - 58                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                                     | 22 - 24                              | 36                                     | 34 - 39                              | 58                                     | 55 - 60                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

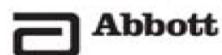

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301191                               | LOT                                    | 311191                               | LOT                                    | 321191                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 120 - 128                            | 132                                    | 128 - 136                            | 159                                    | 154 - 164                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74                                     | 70 - 77                              | 91                                     | 87 - 95                              | 112                                    | 107 - 117                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.80                                   | 0.68 - 0.91                          | 1.20                                   | 1.11 - 1.29                          | 1.50                                   | 1.38 - 1.61                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.7 - 3.6                            | 4.8                                    | 4.4 - 5.2                            | 6.0                                    | 5.5 - 6.4                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.2                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 21                                     | 12 - 30                              | 25                                     | 19 - 32                              | 29                                     | 23 - 35                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 247                                    | 235 - 260                            | 117                                    | 111 - 122                            | 37                                     | 35 - 39                              |
|                 | g/L           | 2.47                                   | 2.35 - 2.60                          | 1.17                                   | 1.11 - 1.22                          | 0.37                                   | 0.35 - 0.39                          |
|                 | mmol/L        | 13.7                                   | 13.0 - 14.4                          | 6.5                                    | 6.2 - 6.8                            | 2.1                                    | 1.9 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.0                                    | 2.7 - 3.4                            | 1.0                                    | 0.8 - 1.1                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 268                                    | 237 - 299                            | 84                                     | 74 - 94                              | 37                                     | 33 - 41                              |
| BUN             | mg/dL         | 64                                     | 57 - 71                              | 11                                     | 10 - 12                              | 7                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 22.8                                   | 20.5 - 25.3                          | 4.0                                    | 3.5 - 4.3                            | 2.3                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 137                                    | 123 - 152                            | 24                                     | 21 - 26                              | 14                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.37                                   | 1.23 - 1.52                          | 0.24                                   | 0.21 - 0.26                          | 0.14                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 34                                     | 32 - 35                              | 53                                     | 51 - 56                              |
|                 | K2EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 36                              | 56                                     | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

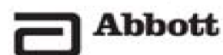

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                                    | 301191                               | LOT                                    | 311191                               | LOT                                    | 321191                               |
|             |        | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           |
| G           |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 256                                    | 244 - 269                            | 126                                    | 119 - 132                            | 39                                     | 37 - 41                              |
|             | g/L    | 2.56                                   | 2.44 - 2.69                          | 1.26                                   | 1.19 - 1.32                          | 0.39                                   | 0.37 - 0.41                          |
|             | mmol/L | 14.2                                   | 13.5 - 14.9                          | 7.0                                    | 6.6 - 7.3                            | 2.2                                    | 2.1 - 2.3                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

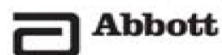

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|              |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|--------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|              |        | <b>LOT</b>                             | <b>301193</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>311193</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>321193</b>                        |
|              |        | Exp.                                   | <b>2027-01-31</b>                    | Exp.                                   | <b>2027-01-31</b>                    | Exp.                                   | <b>2027-01-31</b>                    |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> D |        |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| pH           |        | 7.064                                  | 7.036 - 7.092                        | 7.407                                  | 7.377 - 7.437                        | 7.658                                  | 7.627 - 7.689                        |
| PCO2         | mmHg   | 58.3                                   | 54.5 - 62.1                          | 35.9                                   | 33.6 - 38.2                          | 21.3                                   | 19.7 - 22.9                          |
|              | kPa    | 7.77                                   | 7.26 - 8.28                          | 4.79                                   | 4.48 - 5.09                          | 2.84                                   | 2.63 - 3.05                          |
| PO2          | mmHg   | 75                                     | 67 - 84                              | 115                                    | 107 - 123                            | 143                                    | 135 - 151                            |
|              | kPa    | 10.0                                   | 8.9 - 11.2                           | 15.3                                   | 14.3 - 16.4                          | 19.1                                   | 18.0 - 20.1                          |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 6.47                                   | 5.75 - 7.18                          | 2.03                                   | 1.80 - 2.25                          | 0.91                                   | 0.81 - 1.01                          |
|              | mg/dL  | 58.3                                   | 51.8 - 64.7                          | 18.3                                   | 16.2 - 20.3                          | 8.2                                    | 7.3 - 9.1                            |
|              | g/L    | 0.583                                  | 0.518 - 0.647                        | 0.183                                  | 0.162 - 0.203                        | 0.082                                  | 0.073 - 0.091                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

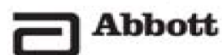

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                                    | 301193                               | LOT                                    | 311193                               | LOT                                    | 321193                               |
|                                    |               | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                                    | 121 - 129                            | 134                                    | 130 - 138                            | 161                                    | 156 - 165                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.80                                   | 0.69 - 0.92                          | 1.21                                   | 1.12 - 1.30                          | 1.52                                   | 1.41 - 1.64                          |
|                                    | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.7                            | 4.8                                    | 4.5 - 5.2                            | 6.1                                    | 5.6 - 6.6                            |
|                                    | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.3                            |
| pH                                 |               | 7.063                                  | 7.035 - 7.091                        | 7.413                                  | 7.383 - 7.443                        | 7.652                                  | 7.621 - 7.683                        |
| PCO2                               | mmHg          | 59.9                                   | 56.0 - 63.8                          | 36.8                                   | 34.4 - 39.2                          | 21.1                                   | 19.5 - 22.7                          |
|                                    | kPa           | 7.98                                   | 7.46 - 8.50                          | 4.91                                   | 4.59 - 5.23                          | 2.81                                   | 2.60 - 3.03                          |
| PO2                                | mmHg          | 82                                     | 76 - 88                              | 116                                    | 108 - 124                            | 141                                    | 134 - 149                            |
|                                    | kPa           | 10.9                                   | 10.1 - 11.7                          | 15.5                                   | 14.4 - 16.5                          | 18.8                                   | 17.9 - 19.9                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 253                                    | 240 - 265                            | 118                                    | 112 - 124                            | 36                                     | 34 - 38                              |
|                                    | g/L           | 2.53                                   | 2.40 - 2.65                          | 1.18                                   | 1.12 - 1.24                          | 0.36                                   | 0.34 - 0.38                          |
|                                    | mmol/L        | 14.0                                   | 13.3 - 14.7                          | 6.5                                    | 6.2 - 6.9                            | 2.0                                    | 1.9 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.1                                    | 2.7 - 3.4                            | 0.9                                    | 0.8 - 1.0                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                                    | umol/L        | 271                                    | 240 - 303                            | 79                                     | 70 - 88                              | 37                                     | 33 - 41                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.38                                   | 5.68 - 7.08                          | 1.99                                   | 1.77 - 2.21                          | 0.89                                   | 0.80 - 0.99                          |
|                                    | mg/dL         | 57.5                                   | 51.2 - 63.8                          | 17.9                                   | 15.9 - 19.9                          | 8.0                                    | 7.2 - 8.9                            |
|                                    | g/L           | 0.575                                  | 0.512 - 0.638                        | 0.179                                  | 0.159 - 0.199                        | 0.080                                  | 0.072 - 0.089                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 37                              | 56                                     | 53 - 59                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                                     | 22 - 24                              | 37                                     | 34 - 39                              | 58                                     | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

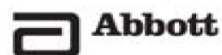

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301193                               | LOT                                    | 311193                               | LOT                                    | 321193                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 121 - 128                            | 133                                    | 129 - 137                            | 160                                    | 155 - 164                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                    | 5.9 - 6.4                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74                                     | 70 - 77                              | 92                                     | 87 - 96                              | 113                                    | 108 - 118                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.79                                   | 0.67 - 0.90                          | 1.20                                   | 1.11 - 1.28                          | 1.49                                   | 1.38 - 1.60                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.7 - 3.6                            | 4.8                                    | 4.4 - 5.1                            | 6.0                                    | 5.5 - 6.4                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.3 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.2                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 20                                     | 11 - 29                              | 26                                     | 19 - 32                              | 30                                     | 24 - 36                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 248                                    | 235 - 260                            | 116                                    | 110 - 122                            | 37                                     | 35 - 39                              |
|                 | g/L           | 2.48                                   | 2.35 - 2.60                          | 1.16                                   | 1.10 - 1.22                          | 0.37                                   | 0.35 - 0.39                          |
|                 | mmol/L        | 13.8                                   | 13.0 - 14.4                          | 6.4                                    | 6.1 - 6.8                            | 2.1                                    | 1.9 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.1                                    | 2.7 - 3.4                            | 0.9                                    | 0.8 - 1.0                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 271                                    | 240 - 303                            | 79                                     | 70 - 88                              | 38                                     | 34 - 42                              |
| BUN             | mg/dL         | 57                                     | 52 - 64                              | 11                                     | 10 - 12                              | 7                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 20.5                                   | 18.5 - 22.7                          | 3.8                                    | 3.5 - 4.3                            | 2.3                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 123                                    | 111 - 136                            | 23                                     | 21 - 26                              | 14                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.23                                   | 1.11 - 1.36                          | 0.23                                   | 0.21 - 0.26                          | 0.14                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 34                                     | 32 - 36                              | 54                                     | 51 - 56                              |
|                 | K2EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 38                              | 56                                     | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

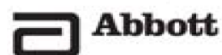

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                                    | 301193                               | LOT                                    | 311193                               | LOT                                    | 321193                               |
|             |        | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           |
| G           |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 256                                    | 243 - 269                            | 127                                    | 120 - 133                            | 40                                     | 38 - 42                              |
|             | g/L    | 2.56                                   | 2.43 - 2.69                          | 1.27                                   | 1.20 - 1.33                          | 0.40                                   | 0.38 - 0.42                          |
|             | mmol/L | 14.2                                   | 13.5 - 14.9                          | 7.0                                    | 6.7 - 7.4                            | 2.2                                    | 2.1 - 2.3                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

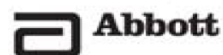

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|              |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|--------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|              |        | <b>LOT</b>                             | <b>301195</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>311195</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>321195</b>                        |
|              |        | Exp.                                   | <b>2027-03-31</b>                    | Exp.                                   | <b>2027-03-31</b>                    | Exp.                                   | <b>2027-03-31</b>                    |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> D |        |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| pH           |        | 7.070                                  | 7.042 - 7.098                        | 7.411                                  | 7.381 - 7.441                        | 7.636                                  | 7.605 - 7.667                        |
| PCO2         | mmHg   | 58.9                                   | 55.0 - 62.7                          | 35.7                                   | 33.4 - 38.1                          | 24.1                                   | 22.3 - 25.9                          |
|              | kPa    | 7.85                                   | 7.33 - 8.36                          | 4.76                                   | 4.45 - 5.08                          | 3.21                                   | 2.97 - 3.45                          |
| PO2          | mmHg   | 76                                     | 68 - 85                              | 114                                    | 106 - 122                            | 140                                    | 132 - 148                            |
|              | kPa    | 10.1                                   | 9.1 - 11.3                           | 15.2                                   | 14.1 - 16.3                          | 18.7                                   | 17.6 - 19.7                          |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 6.47                                   | 5.76 - 7.18                          | 1.99                                   | 1.77 - 2.21                          | 0.96                                   | 0.85 - 1.06                          |
|              | mg/dL  | 58.3                                   | 51.9 - 64.7                          | 17.9                                   | 15.9 - 19.9                          | 8.6                                    | 7.7 - 9.6                            |
|              | g/L    | 0.583                                  | 0.519 - 0.647                        | 0.179                                  | 0.159 - 0.199                        | 0.086                                  | 0.077 - 0.096                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

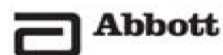

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                                    | 301195                               | LOT                                    | 311195                               | LOT                                    | 321195                               |
|                                    |               | Exp.                                   | 2027-03-31                           | Exp.                                   | 2027-03-31                           | Exp.                                   | 2027-03-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                                    | 121 - 128                            | 133                                    | 129 - 137                            | 160                                    | 155 - 165                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.81                                   | 0.69 - 0.92                          | 1.23                                   | 1.13 - 1.32                          | 1.53                                   | 1.41 - 1.64                          |
|                                    | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.7                            | 4.9                                    | 4.5 - 5.3                            | 6.1                                    | 5.6 - 6.6                            |
|                                    | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.5                                    | 2.3 - 2.6                            | 3.1                                    | 2.8 - 3.3                            |
| pH                                 |               | 7.070                                  | 7.042 - 7.098                        | 7.417                                  | 7.387 - 7.447                        | 7.633                                  | 7.602 - 7.664                        |
| PCO2                               | mmHg          | 60.0                                   | 56.1 - 63.9                          | 36.2                                   | 33.8 - 38.5                          | 23.3                                   | 21.5 - 25.0                          |
|                                    | kPa           | 8.00                                   | 7.48 - 8.52                          | 4.83                                   | 4.51 - 5.13                          | 3.11                                   | 2.87 - 3.33                          |
| PO2                                | mmHg          | 82                                     | 76 - 87                              | 115                                    | 106 - 123                            | 140                                    | 132 - 147                            |
|                                    | kPa           | 10.9                                   | 10.1 - 11.6                          | 15.3                                   | 14.1 - 16.4                          | 18.7                                   | 17.6 - 19.6                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 250                                    | 238 - 263                            | 118                                    | 112 - 124                            | 35                                     | 34 - 37                              |
|                                    | g/L           | 2.50                                   | 2.38 - 2.63                          | 1.18                                   | 1.12 - 1.24                          | 0.35                                   | 0.34 - 0.37                          |
|                                    | mmol/L        | 13.9                                   | 13.2 - 14.6                          | 6.5                                    | 6.2 - 6.9                            | 1.9                                    | 1.9 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.1                                    | 2.7 - 3.5                            | 0.9                                    | 0.8 - 1.0                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                                    | umol/L        | 274                                    | 242 - 306                            | 78                                     | 69 - 87                              | 37                                     | 33 - 41                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.31                                   | 5.61 - 7.00                          | 1.89                                   | 1.68 - 2.09                          | 0.87                                   | 0.77 - 0.97                          |
|                                    | mg/dL         | 56.9                                   | 50.5 - 63.1                          | 17.0                                   | 15.1 - 18.8                          | 7.8                                    | 6.9 - 8.7                            |
|                                    | g/L           | 0.569                                  | 0.505 - 0.631                        | 0.170                                  | 0.151 - 0.188                        | 0.078                                  | 0.069 - 0.087                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 37                              | 56                                     | 53 - 58                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                                     | 22 - 24                              | 36                                     | 34 - 39                              | 58                                     | 55 - 60                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

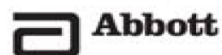

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301195                               | LOT                                    | 311195                               | LOT                                    | 321195                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2027-03-31                           | Exp.                                   | 2027-03-31                           | Exp.                                   | 2027-03-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 120 - 128                            | 132                                    | 128 - 136                            | 159                                    | 155 - 164                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.9                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                    | 5.9 - 6.4                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74                                     | 71 - 77                              | 90                                     | 86 - 94                              | 112                                    | 107 - 117                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.79                                   | 0.68 - 0.91                          | 1.20                                   | 1.11 - 1.29                          | 1.49                                   | 1.38 - 1.60                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.7 - 3.6                            | 4.8                                    | 4.4 - 5.2                            | 6.0                                    | 5.5 - 6.4                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.2                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 20                                     | 11 - 29                              | 25                                     | 19 - 32                              | 30                                     | 24 - 36                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 248                                    | 236 - 260                            | 117                                    | 111 - 123                            | 37                                     | 35 - 38                              |
|                 | g/L           | 2.48                                   | 2.36 - 2.60                          | 1.17                                   | 1.11 - 1.23                          | 0.37                                   | 0.35 - 0.38                          |
|                 | mmol/L        | 13.8                                   | 13.1 - 14.4                          | 6.5                                    | 6.2 - 6.8                            | 2.1                                    | 1.9 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.1                                    | 2.7 - 3.5                            | 0.9                                    | 0.8 - 1.0                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 275                                    | 243 - 307                            | 80                                     | 71 - 90                              | 39                                     | 34 - 43                              |
| BUN             | mg/dL         | 57                                     | 52 - 64                              | 11                                     | 10 - 12                              | 7                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 20.5                                   | 18.5 - 22.7                          | 3.8                                    | 3.5 - 4.3                            | 2.3                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 123                                    | 111 - 136                            | 23                                     | 21 - 26                              | 14                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.23                                   | 1.11 - 1.36                          | 0.23                                   | 0.21 - 0.26                          | 0.14                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 33                                     | 32 - 35                              | 53                                     | 51 - 56                              |
|                 | K2EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 36                              | 56                                     | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

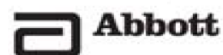

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

|                       |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                              |                                      |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |        | <b>LOT</b> 301195                                                                                 |                                      | <b>LOT</b> 311195                                                                                 |                                      | <b>LOT</b> 321195                                                                                   |                                      |
|                       |        |  Exp. 2027-03-31 |                                      |  Exp. 2027-03-31 |                                      |  Exp. 2027-03-31 |                                      |
| <b>G</b>              |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> F, H, J, K |        |                                                                                                   |                                      |                                                                                                   |                                      |                                                                                                     |                                      |
| Glucose/Glu           | mg/dL  | 256                                                                                               | 244 - 269                            | 127                                                                                               | 120 - 133                            | 40                                                                                                  | 38 - 41                              |
|                       | g/L    | 2.56                                                                                              | 2.44 - 2.69                          | 1.27                                                                                              | 1.20 - 1.33                          | 0.40                                                                                                | 0.38 - 0.41                          |
|                       | mmol/L | 14.2                                                                                              | 13.5 - 14.9                          | 7.0                                                                                               | 6.7 - 7.4                            | 2.2                                                                                                 | 2.1 - 2.3                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

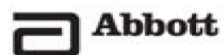

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-116574-01

05-Jun-2026

APOC20261564

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions