

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: D47

CG4+ & G3+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.555 6.495 - 6.615	7.059 7.009 - 7.109	7.429 7.379 - 7.479	7.670 7.620 - 7.720	7.900 7.840 - 7.960
	mmHg	90.8 79.9 - 101.7	58.1 50.6 - 65.6	34.1 27.1 - 41.1	21.4 15.1 - 27.7	18.5 12.5 - 24.5
PCO2	kPa	12.10 10.65 - 13.56	7.74 6.74 - 8.74	4.55 3.61 - 5.48	2.85 2.01 - 3.69	2.47 1.67 - 3.27
	mmHg	48 33 - 63	77 62 - 92	117 100 - 135	144 123 - 166	419 359 - 479
PO2	kPa	6.4 4.4 - 8.4	10.3 8.3 - 12.3	15.6 13.3 - 18.0	19.2 16.4 - 22.1	55.9 47.9 - 63.9
	mmol/L	15.72 12.89 - 18.55	6.44 5.57 - 7.30	1.75 1.25 - 2.25	0.67 0.17 - 1.17	0.53 0.03 - 1.03
Lactate/Lac	mg/dL	141.6 116.1 - 167.1	58.0 50.2 - 65.8	15.8 11.3 - 20.3	6.0 1.5 - 10.5	4.8 0.3 - 9.3
	g/L	1.416 1.161 - 1.671	0.580 0.502 - 0.658	0.158 0.113 - 0.203	0.060 0.015 - 0.105	0.048 0.003 - 0.093

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792275-01

04-Dec-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

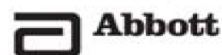

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: D47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	101 97 - 105	125 121 - 129	133 128 - 138	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.7 7.1 - 8.3
iCa	mmol/L	0.35 0.27 - 0.42	0.88 0.80 - 0.96	1.31 1.22 - 1.39	1.61 1.49 - 1.73	2.20 2.04 - 2.37
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.5 3.2 - 3.8	5.2 4.9 - 5.6	6.4 6.0 - 6.9	8.8 8.2 - 9.5
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.8 1.6 - 1.9	2.6 2.4 - 2.8	3.2 3.0 - 3.5	4.4 4.1 - 4.7
pH		6.544 6.484 - 6.604	7.055 7.005 - 7.105	7.429 7.379 - 7.479	7.659 7.609 - 7.709	7.883 7.823 - 7.943
PCO2	mmHg	92.6 81.5 - 103.7	61.1 53.6 - 68.6	34.3 27.3 - 41.3	20.2 13.9 - 26.5	14.3 8.3 - 20.3
	kPa	12.34 10.86 - 13.82	8.14 7.14 - 9.14	4.57 3.64 - 5.51	2.69 1.85 - 3.53	1.91 1.11 - 2.71
PO2	mmHg	56 41 - 71	85 70 - 100	121 103 - 139	148 126 - 170	410 350 - 470
	kPa	7.5 5.5 - 9.5	11.3 9.3 - 13.3	16.1 13.7 - 18.5	19.7 16.8 - 22.7	54.7 46.7 - 62.7
Glucose/Glu	mg/dL	566 481 - 651	258 216 - 300	120 103 - 136	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.66 4.81 - 6.51	2.58 2.16 - 3.00	1.20 1.03 - 1.36	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.4 26.7 - 36.1	14.3 12.0 - 16.7	6.7 5.7 - 7.5	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6 12.1 - 19.1	3.6 2.8 - 4.4	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1379 1070 - 1688	318 248 - 389	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	15.37 12.60 - 18.14	6.38 5.52 - 7.24	1.72 1.22 - 2.22	0.60 0.10 - 1.10	0.47 0.00 - 0.97
	mg/dL	138.5 113.5 - 163.4	57.5 49.7 - 65.2	15.5 11.0 - 20.0	5.4 0.9 - 9.9	4.2 0.0 - 8.7
	g/L	1.385 1.135 - 1.634	0.575 0.497 - 0.652	0.155 0.110 - 0.200	0.054 0.009 - 0.099	0.042 0.000 - 0.087
HCT	K3EDTA %	13 10 - 16	23 20 - 26	35 32 - 38	57 53 - 60	67 63 - 70
	K2EDTA %	13 10 - 17	24 21 - 27	37 33 - 40	59 55 - 63	69 66 - 73


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

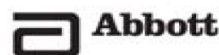

792275-01

04-Dec-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

CLEW: D47

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	132 128 - 137	160 154 - 166	178 171 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.4 2.1 - 2.7	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	62 58 - 67	75 70 - 80	91 85 - 97	113 105 - 122	124 115 - 133
iCa	mmol/L	0.34 0.27 - 0.42	0.86 0.78 - 0.94	1.28 1.19 - 1.36	1.57 1.45 - 1.69	2.19 2.02 - 2.35
	mg/dL	1.4 1.1 - 1.7	3.4 3.1 - 3.8	5.1 4.8 - 5.4	6.3 5.8 - 6.8	8.8 8.1 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.6 - 1.9	2.6 2.4 - 2.7	3.1 2.9 - 3.4	4.4 4.0 - 4.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	15 9 - 21	21 12 - 30	25 19 - 32	28 22 - 34	43 37 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	569 484 - 655	258 216 - 300	117 102 - 133	34 25 - 43	24 15 - 33
	g/L	5.69 4.84 - 6.55	2.58 2.16 - 3.00	1.17 1.02 - 1.33	0.34 0.25 - 0.43	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.6 26.9 - 36.4	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.7 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	15.6 12.1 - 19.1	3.6 2.8 - 4.4	1.0 0.6 - 1.4	0.4 0.0 - 0.8	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1379 1070 - 1688	318 248 - 389	88 53 - 124	35 0 - 71	27 0 - 62
BUN	mg/dL	125 108 - 142	60 52 - 68	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	44.6 38.6 - 50.7	21.4 18.6 - 24.3	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	268 231 - 304	128 111 - 146	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.68 2.31 - 3.04	1.28 1.11 - 1.46	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	21 18 - 24	33 30 - 36	54 51 - 58	64 60 - 68
	K2EDTA %	12 9 - 16	22 19 - 25	35 31 - 38	57 53 - 60	67 63 - 71

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792275-01


04-Dec-2023

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

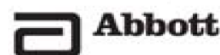

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

 **Exp.** 2024-12-31

CLEW: D47

G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Glucose/Glu	mg/dL	554 471 - 637	262 220 - 304	129 112 - 147	43 34 - 52	30 21 - 39
	g/L	5.54 4.71 - 6.37	2.62 2.20 - 3.04	1.29 1.12 - 1.47	0.43 0.34 - 0.52	0.30 0.21 - 0.39
	mmol/L	30.8 26.1 - 35.4	14.5 12.2 - 16.9	7.2 6.2 - 8.2	2.4 1.9 - 2.9	1.7 1.2 - 2.2

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792275-01

04-Dec-2023

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23226 (L1 331168, L2 301168, L3 311168, L4 321168, L5 341170)

Exp. 2024-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

792275-01

04-Dec-2023



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

